

CZ - Masážní vibrační polštářek

EAN/GTIN: 4039525010146

Použití přístroje:

- Tento produkt je určen k masáži břicha, zad, ramen a stehen.
- Produkt není určen pro terapeutické účely!
- Produkt je určen pro soukromé použití a není vhodný pro komerční aplikaci.
- Používejte produkt pouze podle pokynů. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením, poškozením nebo pokusy o opravu. To platí i pro běžné opotřebení.

Bezpečnostní pokyny - hrozí újma na zdraví a úraz:

Uchovávejte tento produkt mimo dosah zvířat a osob (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo těch, kteří nemají dostatečné zkušenosti a/nebo znalosti, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyli touto osobou poučeni o používání produktu. Zajistěte, aby si s produktem nehrály děti. Děti musí být pod dohledem někoho, kdo ví, jak produkt správně používat, nebo pouze po konzultaci s lékařem.

Těhotné osoby by neměly produkt používat.

Produkt nesmí být používán kojenci nebo osobami v bezvědomí.

Pokud patříte do rizikové skupiny, například trpíte kardiovaskulárními problémy nebo oběhovými poruchami, nesmíte zařízení používat.

Nepoužívejte produkt na místa s otoky nebo zanícenými částmi kůže.

Pokud problémy přetrvávají, konzultujte použití produktu s lékařem.

Okamžitě přestaňte používat produkt, pokud se cítíte slabí nebo máte jiné příznaky, jako je necitlivost, bolest na hrudi nebo končetinách, stejně jako závratě. V případě nevolnosti okamžitě přestaňte a kontaktujte lékaře.

Nakládání s bateriemi:

Před vložením baterií zkontrolujte, zda jsou kontakty v zařízení a na bateriích čisté, a v případě potřeby je očistěte.

Používejte pouze typ baterií uvedený v technických údajích.

Vždy vyměňte všechny baterie. Nepoužívejte různé typy baterií, značky nebo baterie s různou kapacitou. Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

Vyjměte baterie ze zařízení, pokud jsou vybité nebo pokud zařízení nepoužíváte delší dobu. Tím se vyhnete poškození způsobenému únikem.

Ihned vyjměte z zařízení jakékoli unikající baterie. Před vložením nové baterie očistěte kontakty.

Baterie nesmí být nabíjeny nebo reaktivovány jinými způsoby. Nesmí být rozebírány, likvidovány v ohni, ponořeny do kapalin nebo zkratovány.

Správné nakládání s přístrojem:

Před každým použitím zkontrolujte, zda produkt není poškozen. Produkt nesmí být používán, pokud vykazuje viditelné poškození.

Nikdy se nepokoušejte produkt sami opravovat nebo rozebírat. V případě poruchy nebo poškození kontaktujte zákaznický servis nebo odborníka.

Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení produktu, nebo které bylo výslovně doporučeno prodejcem.

Nedovolte dětem, aby s produktem manipulovaly, a nevystavujte jej silným nárazům.

Udržujte dostatečnou vzdálenost od zdrojů tepla, např. sporáků nebo pecí.


Nevystavujte produkt pádu na ostré předměty, nekládejte do něj žádné špendlíky, fixační špendlíky nebo jiné špičaté předměty. Udržujte produkt mimo dosah ostrých předmětů. Nevládejte do produktu žádné špendlíky, fixační špendlíky.

Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.

Nevystavujte produkt extrémním teplotám, prudkým změnám teploty, neponořujte jej do vody ani jej nevystavujte vodě nebo jiným kapalinám! Zajistěte, aby produkt nemohl nikdy spadnout do vody.

Popis produktu:

- 1) Tlačítko pro zapnutí, vypnutí
- 2) Upínací popruh
- 3) Vibrační jednotka
- 4) Zip pro otevření přihrádky s bateriemi

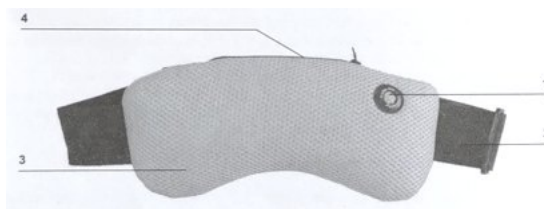

Před prvním použitím:

Riziko udušení! Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí a zvířat.

Rozbalte všechny části a ujistěte se, že obsah balení je kompletní a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny během přepravy. Pokud zjistíte poškození komponentů, nepoužívejte je, místo toho kontaktujte svého prodejce.


Vložte baterie do produktu. Budete potřebovat dvě 1,5 voltové baterie typu AA. Ty nejsou součástí balení:

- Otevřete zip na horní straně pásu.
- Vyjměte držák baterií. POZOR: Držák baterií je připojen k vibrační jednotce pomocí kabelů. Vytáhněte držák baterií pouze do té míry, abyste mohli vyměnit baterie.

Netahejte silně za kabely, protože by to mohlo způsobit poškození produktu!

- Vložte dvě 1,5 voltové baterie typu AA. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Vložte držák baterií zpět do pásu a zavěte pás pomocí zipu.

Masážní zóny:

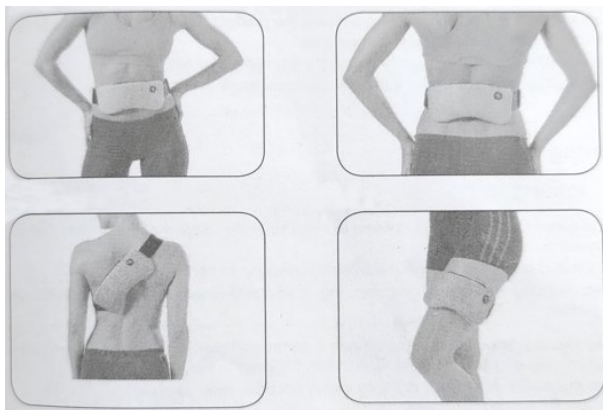

Používání přístroje:

1. Umístěte vibrační masážní pás na oblast těla, kterou chcete masírovat:
 - Oblast břicha, zad, ramen a stehna
 2. Zapněte pás a zkontrolujte, zda je správně nasazen. Pokud je pás příliš těsný, upravte jeho délku.
 3. Stiskněte tlačítko ON/OFF jednou pro aktivaci produktu. Vibrační masážní pás začne okamžitě vibrovat.
 4. Stiskněte tlačítko ON/OFF znovu pro aktivaci druhé rychlostní úrovně.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF potřetí pro vypnutí přístroje.

Těhotné osoby nesmí používat zařízení nebo pouze po konzultaci s lékařem!

Produkt nesmí být používán kojenci nebo osobami v bezvědomí.

Osoby s oběhovými poruchami nesmí zařízení používat.

Pokud patříte do rizikové skupiny, například trpíte kardiovaskulárními problémy nebo problémy s svaly nebo kůží, určité se před použitím zařízení poraďte s lékařem.

Nepoužívejte produkt na místa s otoky nebo zanícenými částmi kůže.

Okamžitě přestaňte používat zařízení, pokud se cítíte slabí nebo máte závratě. V případě nevolnosti, necitlivosti, bolesti na hrudi nebo končetinách, stejně jako bušení srdce nebo jiných příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.

Údržba a čištění:

Nikdy nepotápějte výrobek ve vodě ani jiných kapalinách! Ujistěte se, že produkt nemůže spadnout do vody nebo se namočit. Výrobek není vhodný do pračky ani sušičky!

Při čištění nepoužívejte žádné drsné nebo abrazivní čističe. Mohly by poškodit povrch.

Když je potřeba, otřete výrobek vlhkým, měkkým hadříkem a pokud je to nutné, použijte malé množství neagresivního čističe. Použijte měkký, suchý hadřík k osušení.

Skladujte zařízení na čistém, suchém místě, které není přístupné dětem.

Řešení potíží s přístrojem:

Pokud přístroj nepracuje správně, můžete se pokusit sami identifikovat závadu podle pokynů níže. Nepokoušejte se přístroj demontovat a opravovat sami.

- Přístroj nepracuje, nezapíná se: Jsou v přístroji vloženy 2x AA baterie?

Jsou baterie příliš slabé? Vyměňte baterie za nové.

Jsou baterie v přístroji správně vloženy? Ujistěte se, že je jejich polarita v přístroji správná.

Technická data:

Napájení: 3V DC (2x 1.5V baterie typu AA)

Likvidace, recyklace:

Obalový materiál je recyklovatelný. Zlikvidujte obal ekologicky.

Zařízení zlikvidujte ekologicky. Nevhazujte jej do domácího odpadu. Zlikvidujte jej v recyklačním centru pro stará elektrická a elektronická zařízení. Pro více informací kontaktujte správu ve vaší obci.

SK - Masážny vibračný vankúšik

Použitie prístroja:

- Tento produkt je určený na masáž brucha, chrbta, ramien a stehien.
- Produkt nie je určený na terapeutické účely!
- Produkt je určený na súkromné použitie a nie je vhodný pre komerčnú aplikáciu.
- Používajte produkt iba podľa pokynov. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne.
- Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, poškodením alebo pokusmi o opravu. To platí aj pre bežné opotrebenie.

Bezpečnostné pokyny - hrozí ujma na zdraví a úraz:

Uchovávať tento produkt mimo dosahu zvierat a osôb (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo tých, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti a/alebo znalosti, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli touto osobou poučení o používaní produktu. Zaisťte, aby sa s produktom nehrali deti. Deti musia byť pod dohľadom niekoho, kto vie, ako produkt správne používať, alebo iba po konzultácii s lekárom.

Tehotné osoby by nemali produkt používať.

Produkt nesmie byť používaný dojčatami alebo osobami v bezvedomí.

Ak patríte do rizikovej skupiny, napríklad trpíte kardiovaskulárnymi problémami alebo obehovými poruchami, nesmiete zariadenie používať.

Nepoužívajte produkt na miesta s opuchmi alebo zapálenými časťami kože.

Pokiaľ problémy pretrvávajú, konzultujte použitie produktu s lekárom.

Okamžite prestaňte používať produkt, ak sa cítite slabí alebo máte iné príznaky, ako je necitlivosť, bolesť na hrudi alebo končatinách, rovnako ako závraty. V prípade nevolnosti okamžite prestaňte a kontaktujte lekára.

Nakladanie s batériami:

Pred vložením batérií skontrolujte, či sú kontakty v zariadení a na batériách čisté, av prípade potreby ich očistite.

Používajte iba typ batérií uvedený v technických údajoch.

Vždy vymeňte všetky batérie. Nepoužívajte rôzne typy batérií, značky alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

Vyberte batérie zo zariadenia, ak sú vybité alebo ak zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu. Tým sa vyhnete poškodeniu spôsobenému únikom.

Okamžite vyberte zariadenia akékoľvek unikajúce batérie. Pred vložením novej batérie očistite kontakty.

Batérie nesmú byť nabíjané alebo reaktivované inými spôsobmi. Nesmú byť rozoberané, likvidované v ohni, ponorené do kvapalín alebo skratované.

Správne nakladanie s prístrojom:

Pred každým použitím skontrolujte, či produkt nie je poškodený. Produkt nesmie byť používaný, pokiaľ vykazuje viditeľné poškodenie.

Nikdy sa nepokúšajte produkt sami opravovať alebo rozoberať. V prípade poruchy alebo poškodenia kontaktujte zákaznický servis alebo odborníka.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia produktu, alebo ktoré bolo výslovne odporúčané predajcom.

Nedovoľte deťom, aby s produktom manipulovali, a nevystavujte ho silným nárazom.

Udržujte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla, napr. sporákov alebo pecí.


Nevystavujte produkt pádu na ostré predmety, nekladajte doň žiadne špendlíky, fixačné špendlíky alebo iné špicaté predmety. Udržujte produkt mimo dosahu ostrých predmetov. Nevkladajte do produktu žiadne špendlíky, fixačné špendlíky.

Nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkosti.

Nevystavujte produkt extrémnym teplotám, prudkým zmenám teploty, neponárajte ho do vody ani ho nevystavujte vode alebo iným kvapalinám! Zaisťte, aby produkt nemohol nikdy spadnúť do vody.

Popis produktu:

- 1) Tlačidlo pre zapnutie, vypnutie
- 2) Upínací popruh
- 3) Vibračná jednotka
- 4) Zip pre otvorenie priehradky s batériami

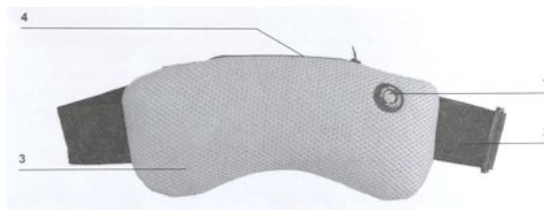

Pred prvým použitím:


Riziko udusenía! Uchovávejte obalový materiál mimo dosahu detí a zvierat.

Rozbaľte všetky časti a uistite sa, že obsah balenia je kompletný a skontrolujte, či nie sú poškodené počas prepravy. Ak zistíte poškodenie komponentov, nepoužívajte ich, namiesto toho kontaktujte svojho predajcu.

Vložte batérie do produktu. Budete potrebovať dve 1,5 voltové batérie typu AA. Tie nie sú súčasťou balenia:

- Otvorte zips na hornej strane pásu.
- Vyberte držiak batérií. POZOR: Držiak batérií je pripojený k vibračnej jednotke pomocou káblov. Vytiahnite držiak batérií iba do tej miery, aby ste mohli vymeniť batérie. Neťahajte silne za káble, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie produktu!
- Vložte dve 1,5 voltové batérie typu AA. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Vložte držiak batérií späť do pásu a zatvorte pás pomocou zipsu.

Masážné zóny:

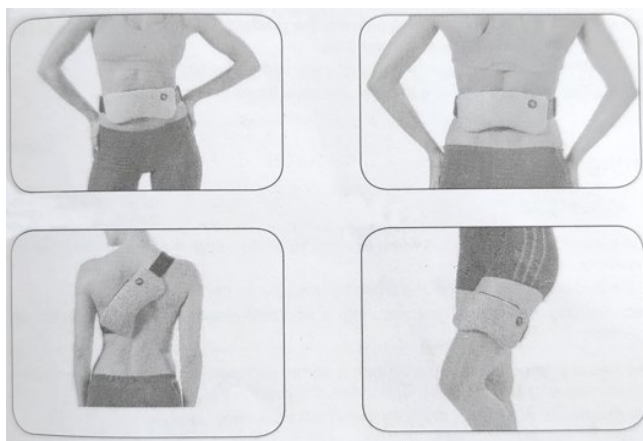

Používanie prístroja:

1. Umiestnite vibračný masážny pás na oblasť tela, ktorú chcete masírovať:
 - Oblasť brucha, chrbta, ramien a stehna
 2. Zapnite pás a skontrolujte, či je správne nasadený. Pokiaľ je pás príliš tesný, upravte jeho dĺžku.
 3. Stlačte tlačidlo ON/OFF raz pre aktiváciu produktu. Vibračný masážny pás začne okamžite vibrovať.
 4. Stlačte tlačidlo ON/OFF znovu pre aktiváciu druhej rýchlostnej úrovne.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF tretíkrát pre vypnutie prístroja.

Tehotné osoby nesmú používať zariadenie alebo iba po konzultácii s lekárom!

Produkt nesmie byť používaný dojčatami alebo osobami v bezvedomí.

Osoby s obehovými poruchami nesmú zariadenie používať.

Ak patríte do rizikovej skupiny, napríklad trpíte kardiovaskulárnymi problémami alebo problémami s svalmi alebo kožou, určite sa pred použitím zariadenia poraďte s lekárom.

Nepoužívajte produkt na miesta s opuchmi alebo zapálenými časťami kože.

Okamžite prestaňte používať zariadenie, ak sa cítite slabí alebo máte závraty. V prípade nevoľnosti, necitlivosti, bolesti na hrudi alebo končatinách, rovnako ako búšenie srdca alebo iných príznakov, okamžite kontaktujte lekára.

Údržba a čistenie:

Nikdy nepotápajte výrobok vo vode ani iných kvapalinách! Uistite sa, že produkt nemôže spadnúť do vody alebo sa namočiť. Výrobok nie je vhodný do práčky ani sušičky!

Pri čistení nepoužívajte žiadne drsné alebo abrazívne čističe. Mohli by poškodiť povrch.

Keď je potrebné, utrite výrobok vlhkou, mäkkou handričkou a pokiaľ je to nutné, použite malé množstvo neagresívneho čističa. Použite mäkkú, suchú handričku na osušenie. Skladujte zariadenie na čistom, suchom mieste, ktoré nie je prístupné deťom.

Riešenie problémov s prístrojom:

Pokiaľ prístroj nepracuje správne, môžete sa pokúsiť sami identifikovať závalu podľa pokynov nižšie. Nepokúšajte sa prístroj demontovať a opravovať sami.

- Prístroj nepracuje, nezapína sa: Sú v prístroji vložené 2x AA batérie?

Sú batérie príliš slabé? Vymeňte batérie za nové.

Sú batérie v prístroji správne vložené? Uistite sa, že je ich polarita v prístroji správna.

Technické údaje:

Napájanie: 3V DC (2x 1.5V batéria typu AA)

Likvidácia, recyklácia:

Obalový materiál je recyklovateľný. Zlikvidujte obal ekologicky.

Zariadenie zlikvidujte ekologicky. Nevhadzujte ho do domáceho odpadu. Zlikvidujte ho v recyklačnom centre pre staré elektrické a elektronické zariadenia. Pre viac informácií kontaktujte správu vo vašej obci.