

Masážní přístroj na hubnutí a celulitidu

Model: PL-664B

Náš tělový masážní přístroj používá hluboké a silné vysokofrekvenční vibrace a nastavitelnou rychlost, aby vám pomohla vyhladit, tvarovat, masírovat a tonizovat vaše tělo, a to vše z pohodlí vašeho domova.


Před použitím si prosím přečtěte tento návod pro správné a bezpečné použití tohoto produktu. Popisuje jak správně používat produkty, aby se předešlo nebezpečí nebo poškození osob a majetku. Po přečtení prosím uložte manuál na bezpečné místo, abyste si jej mohli kdykoli přečíst.



Sada obsahuje 8 unikátních nástavců a síťový kryt na ochranu vlasů proti zacuchání do přístroje.

- Plochý nástavec - ideální pro masáž šíje, ramen a zad.
- Vlnitý nástavec - nepostradatelný v boji s tukem, ideální pro oblast stehen a hýždí.
- Kuličkový nástavec - stimuluje a zpevňuje svaly a pokožku. Zlepšuje krevní oběh v břišní oblasti, odstraňuje toxiny a zabraňuje zácpě.
- Nástavec TaiChi - umožní dosáhnout svalové relaxace bez pocitu bolesti, uvolňuje napětí a stav relaxace obnovuje vnitřní harmonii.
- Nástavec s hladkými válečky - rolování válečkem je technika, při které je tlak na pokožku po celou dobu ošetření nepřerušovaný. Jemným rolováním nahoru a dolů po zádech podél páteře se svaly zahřejí a připraví na intenzivnější, hlubší masážní techniky.
- Nástavec s trojúhelníkovými válečky - působí proti ochabování, stimuluje průtok krve, uvolňuje svalové napětí. Stimuluje krevní a lymfatický oběh.
- Válečkový nástavec s kuličkami - odstraňuje celulitidu odbouráváním tukových buněk a také odstraňováním přebytečné vody z těla.
- Peelingový nástavec - odstraňuje suchou a zrohovatělou pokožku na chodidlech.

Pokyny k použití

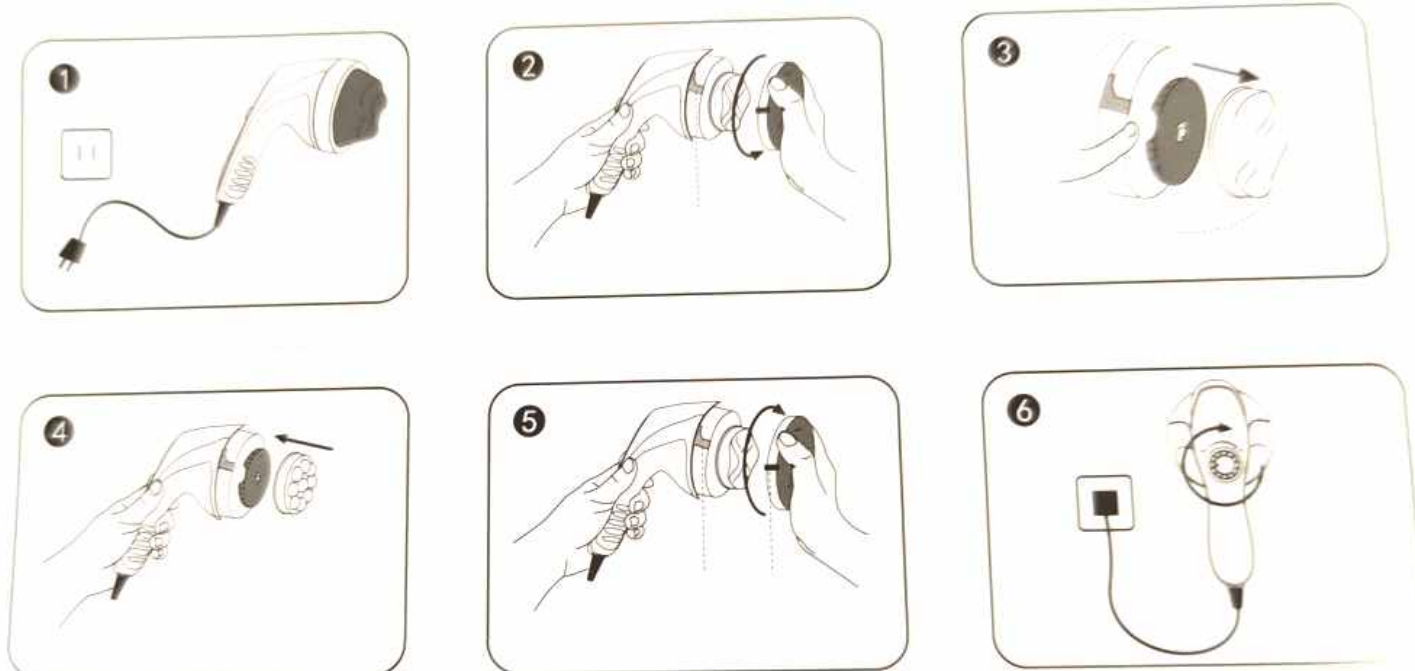

Návod k používání

- 1) Zapojte zástrčku do zásuvky, rozsvítí se kontrolka napájení.
- 2) Otočte vypínačem napájení / otočným knoflíkem rychlosti doprava, aby se spustila vibrační masáž a regulovala intenzita vibrací. Otočte jej doleva, abyste snížili intenzitu a vypnuli napájení.
- 3) Po použití nebo když není produkt používán, odpojte jej ze zásuvky.

Specifikace produktu

Název produktu: Masážní přístroj na hubnutí a celulitidu

Hlavní materiál: ABS

Napětí: AC220-240V

Výkon: 28W

Údržba a skladování

K čištění používejte pouze měkký hadřík a neutrální čisticí prostředek.

Zabraňte, aby se do zařízení dostala voda nebo jiná kapalina.

Po použití skladujte na suchém místě, nevystavujte přístroj vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření a korozivním plynům.

Vždy odpojte zařízení ze zásuvky, pokud není používáno.

Upozornění

Nepoužívejte zařízení, pokud jste těhotná nebo trpíte srdečními problémy nebo jakýmkoli fyzickými zraněními, pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem.

Zařízení používejte jednu hodinu po jídle.

Držte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte zařízení na stejnou oblast těla déle než 15 minut v kuse.

Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde teplota přesahuje 37 stupňů Celsia nebo 100 stupňů Fahrenheita.

Nepoužívejte zařízení v koupelně nebo na jakýchkoli vlhkých místech.

Pokud zařízení nefunguje správně, okamžitě odpojte od napájení.

Nepoužívejte zařízení, když se necítíte dobře.

Při výměně masážních hlavic se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

Pokud je napájecí kabel poškozen, přístroj nepoužívejte.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.