

Krční masážní polštář Shiatsu

Model: ZX-2002

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál k použití. Uskladněte ho pro budoucí potřebu.

Vlastnosti přístroje:

Úleva od únavy a bolesti svalů

Podpora krevního oběhu

Snížení únavy

Uvolnění napětí

Podpora fyzického a mentálního uvolnění

Zlepšení stavu páteře

Parametry:

Příkon: 3.7 W

Automatický časovač: ca 10 minut

Nabíjecí napětí: DC 5V

Váha: 495g

Způsob použití:

- 1) Stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy, masér se spustí a přejde do pracovního stavu.
- 2) Opakovaně stiskněte tlačítko "M" a přepínáte mezi režimy hnětení - otáčení směru masáže.
- 3) V režimu hnětení stiskněte tlačítko "III" pro zapnutí infračerveného ohřevu.
- 4) Když přestanete přístroj používat, podržte tlačítko napájení na 2 sekundy pro vypnutí.
- 5) Masér je napájen vestavěnou lithiovou baterií. Pokud je baterie téměř vybitá nebo vybitá, před použitím ji nabijte.
- 6) Při nabíjení použijte nabíjecí kabel od tohoto produktu a zkontrolujte, zapojte do rozhraní DC pro nabíjení.
- 7) Při nabíjení může být napětí nestabilní, a proto je zakázáno používat produkt během nabíjení.
- 8) Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny, po úplném nabití odpojte napájení.
- 9) Tento produkt obsahuje příslušenství pouze pro použití s tímto zařízením. Jiné příslušenství není vhodnou náhradou.

Běžné poruchy a jejich řešení

Porucha

Přístroj se nespustí

Přístroj přestal pracovat

Příčina

Vybitá baterie

Doběhl automatický časovač

Vybitá baterie


Řešení

Dobijte baterii


Znovu spustte přístroj

Dobijte baterii

V případě, že poruchy přetrvávají, kontaktujte servis.

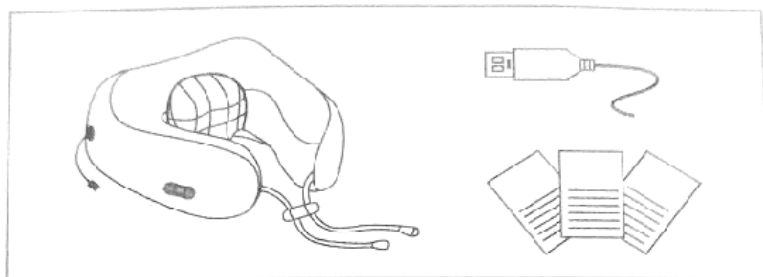

Šňůrková přezka

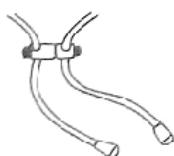

Stisk tlačítka pro rozeptnutí



Stiskem a posouváním přezky uvolníte, utáhnete šňůrku

Používání zástrčky a napájecího kabelu

- 1) Zkontrolujte, zda napětí odpovídá specifikacím produktu.
- 2) Nepoužívejte jiné podobné příslušenství místo originálního příslušenství produktu.
- 3) Nedotýkejte se napájecího zdroje nebo zástrčky mokřima rukama, abyste předešli poruše nebo elektrickému šoku.
- 4) Nenabíjejte produkt, když je napětí nestabilní.

Nepoužívejte v případě:

- 1) Masážní přístroj se chová zvláštně nebo je poškozený.
- 2) Pokud během masáže dojde k vážné nebo silné bolesti, okamžitě přestaňte s masáží a vyhledejte lékařskou pomoc.
- 3) Pokud zjistíte z výše uvedených situací, že příčinou je produkt, reklamujte ho.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- 1) Neumisťujte výrobek do koupelny nebo na vlhké místo.
- 2) Nenechávejte masážní přístroj na přímém slunci nebo při vysoké teplotě po dlouhou dobu.
- 3) Pokud výrobek používají děti, fyzicky nebo mentálně postižení, musí být pod dohledem a vedením opatrovníka.
- 4) Tento výrobek má vestavěnou lithiovou baterii, prosím, likvidujte tento výrobek v souladu s příslušnými předpisy o ochraně životního prostředí.

Přístroj je nevhodný pro:

- 1) Osoby v léčení lékařem nebo ve fyzickém nepohodlí.
- 2) Pacienti s akutním náhlým onemocněním
- 3) Uživatelé alkoholu
- 4) Nezletilí, děti

Nabíjení baterie:

Při běžném používání je životnost dobíjecí baterie 2500 cyklů nabíjení a vybíjení.

Pokud se dobíjecí baterie nepoužívá po delší dobu, její životnost se zkrátí. Doporučuje se nabíjet alespoň 1-2krát měsíčně.

Záruční informace

- 1) Od data nákupu, pokud dojde k poruše při běžném používání, můžete využít 2 roky bezplatného záručního servisu, kromě poškození (například: nesprávné rozebrání dílů, poškození při manipulaci atd.), přírodního poškození (například: požár, zemětřesení, povodeň, poškození způsobené hlodavci atd.), které není kryto touto zárukou.
- 2) Bezplatný záruční servis není poskytován kvůli poruše způsobené nesprávným použitím samotnými spotřebiteli.

Výjimky ze záruky

Manipulace s přístrojem v rozporu s pokyny.

Vrácení produktu je neúplné, příslušenství není kompletní nebo uživatel rozebírá, opravuje přístroj sám, atd.

Poškození způsobené lidskými faktory jako ponoření, násilný náraz, atd.